

ARTROMED

Soluciones Integrales en Consumibles Médicos

Consumibles Ortopedia Blanda



ARTROMED

Soluciones Integrales en Consumibles Médicos

Ortopedia Blanda

Índice

Ortopedia Blanda

Espalda

Faja Soporte Sacrolumbar para Dolor de Espalda	4
Corset Marco de Hiperextensión de Jewett de 3 Puntos	5
Cojín Soporte Lumbar de espalda para Silla de Oficina Ajustable y Transpirable, 100% Memory Foam	6

Columna

Soporte para Clavícula y Corrector de Postura en 8	7
Faja Corset Toracolumbar Postoperatorio OSSUR TLSO™ Miami 456	8
Faja Espinal Postoperatoria para Cirugía de Columna OSSUR Miami LSO™	9
Faja soporte LumboSacro Postoperatoria Cirugía de Columna M-LSO	10

Cuello

Collarín Miami Ajustable Talla Universal	11
Almohada de apoyo cervical para dolor de cuello, almohada ortopédica con triple soporte, firme, color blanco, tamaño universal 61 cm x 40 cm	12

Mano / Muñeca

Férula para Muñeca con Correa de 8"	13
Muñequera para Túnel del Carpo Ossur EXOFORM®	14
Férula Inmovilizador para Pulgar Universal	15
Articulada Posicionador de Muñeca y Mano para Hemiplejias o Cuadriplejias Específicas. Variedad: Derecha o Izquierda. Tallas Chica, Mediana y Grande	16

Brazo / Hombro

Inmovilizador Universal de Hombro con Cabestrillo	17
Cabestrillo con cojín abductor y pelota de ejercicio para cirugía de hombro	17
Codera ROM Postoperatoria Férula Dinámica Articulada Para Codo. Variedad: Derecha o Izquierda. Talla Universal	18
Férula de Codo de Tenista con Aire, tipo Air Cast	18
Pad Compresa Fría de Gel con Presión de Aire para Hombro	19

ARTROMED

Soluciones Integrales en Consumibles Médicos

Ortopedia Blanda

Índice

Ortopedia Blanda

Rodilla

Rodillera Estabilizadora de Rótula	20
Rodillera Mecánica Articulada Deportiva con Soportes Laterales de Aluminio Ossur FOR MFIT	20
Rodillera Postoperatoria Talla UNIVERSAL con arcos de movimiento graduados ROM	21
Inmovilizador de Rodilla Universal Tripanel	21
Pad Compresa Fría de Gel con Presión de Aire para Rodilla	22

Cadera

Soporte para Cadera Articulado Mecánico Graduable ROM. Tamaño Derecho e Izquierdo	23
---	----

Pierna / Pie

Férula Bota Walker Corta CON AIRE, marca ALLARD	24
Férula Bota Walker Larga CON AIRE, marca ALLARD	24
Tobillera con Aire/Gel tipo Air cast	25
Férula Nocturna para Fascitis Plantar/Espolón Mediana y Grande	25
Anillo Patelar Rotuliano Patella Tendon Brace	26
Pad Compresa Fría de Gel con Presión de Aire para Tobillo	27

Cubiertas Pierna/mano Para Baño Y Regadera

Cubierta para Yeso y Vendajes contra Agua para Regadera, Tamaño: BRAZO ADULTO, BRAZO CORTO, MANO	28
Cubierta para Yeso y Vendajes contra Agua para Regadera, Tamaño: PIE, PIERNA CORTA, PIERNA LARGA	29

Electroterapia

Sistema de Electroterapia EMS tonificación muscular y alivio de dolor K00045 PERFECT EMS	30
Electro terapia Deportiva para Tonificación y Masaje Muscular EMS, TENS K00155 SPORTS TENS 2	31
Sistema digital de Electroterapia TENS Alivio del Dolor K00062 PERFECT TENS	32

• Faja Soporte Sacrolumbar para Dolor Espalda

Nuestra Faja de Soporte Sacrolumbar provee soporte y quita el estrés a la espina lumbar, aliviando el dolor de espalda del paciente.

REF-OL-WA110

Se puede usar en reposo en casa u oficina o al hacer ejercicio.

Indicaciones:

- Lumbalgia.
- Trastornos ligamentosos.
- Espondilolistesis leve, espondilolisis.
- Hernia de disco intervertebral (HIVD).
- Rehabilitación Postquirúrgica.
- Distensión muscular de espalda.

Características:

- Estabilización de compresión firme.
- Paneles posteriores rígidos y paneles frontales rígidos pero removibles.
- Tirantes anchos de velcro elásticos ajustables.
- Cómoda tela laminada CSUS.
- Las suspensiones ergonómicas livianas retienen la forma de la faja.



Cintas de compresión ajustables para mayor firmeza y doble velcro para cierre firme



Comidad que mereces: encuentra el ajuste perfecto con el doble velcro, servirá para fijar las cintas de compresión como para evitar que la faja se esté abriendo

Tallas:

Medir la Circunferencia de Cadera

- Chica 54 cm – 67 cm
- Mediana 68 cm – 78 cm
- Grande 79 cm – 90 cm
- Extra Grande 91 cm – 104 cm
- Extra Extra Grande 105 cm – 122 cm



*Se adjunta video del producto
Video funcionamiento real:
<https://bit.ly/3ZGJ2vA>



• Corset de Jewett Ligero de Hiperextensión con 3 Puntos VISSION

REF-HE001B

Nuestra prótesis de hiperextensión proporciona estabilización tri-plana en una ortesis ligera, fácil de aplicar y ajustar.

- Control de triple plano.
- Altura ajustable.
- Máxima Comodidad del Paciente: La banda pélvica con resorte reduce la migración ascendente al sentarse.
- Permite el ajuste de la tensión para el panel posterior.

Medición:

Medición basada en la circunferencia de la cintura (Pelvis).

Tallas:

- | | |
|----------------|-----------------|
| • Chica | 60 cm – 75 cm |
| • Mediana | 75 cm – 90 cm |
| • Grande | 90 cm – 105 cm |
| • Extra Grande | 105 cm – 115 cm |



• **Cojín Soporte Lumbar de Espalda para Silla de Oficina**

REF-FIB-300

DISEÑO ERGONÓMICO:

100% ESPUMA MEMORY FOAM Elaborado en un 100% de Espuma Memory Foam de calidad superior. Nuestro soporte de silla usa el calor del cuerpo para ajustarse a tu contorno. El diseño ergonómico tiene contornos para adaptarse a las curvas de tu espalda, mide 35 cm x 32 cm x 10 cm.

• **ALIVIA Y EVITA DOLORES DE ESPALDA:** El uso de nuestro soporte alivia y evita el dolor de Ciática, dolor de espala superior, media o espalda baja. La mayoría de las sillas no tienen un soporte adecuado de espalda, lo que causa dolor después de estar sentado por un tiempo prolongado, nuestro soporte te ayudará a quitar la presión que causa el dolor de espalda cuando se está sentado todo el día.

• **SOPORTE DE ESPALDA Y MEJORA POSTURA:** Nuestro soporte lumbar para silla de oficina está diseñado para proporcionar soporte y mantener la postura correcta de la espalda baja, brindándole un soporte óptimo. Una postura correcta de la espalda le permitirá trabajar de una manera más eficiente y cómoda reduciendo la fatiga que siente después de estar sentado por un largo tiempo.



TALLA PERFECTA
Para Todos



• **CUBIERTA TRANSPIRABLE:** Fuimos más allá de solo diseñar un soporte para silla, ya que la cubierta es transpirable y hipoalergénica, lo que evita el sudor de espalda.

• **TRANSFORME SU SILLA DE OFICINA:** El soporte cuenta con dos cintas ajustables que le permitirán convertir su silla de oficina en un lugar adecuado para trabajar largas horas de Home Office sin dolor ni fatiga en su espalda.

• Soporte para Clavícula y Corrector de Postura en 8

REF-LS2101U

CARACTERÍSTICAS:

- Correas de hombro acolchadas; minimiza la incómoda unión sobre el hombro y debajo de los brazos.
- Diseño de figura 8 fácilmente ajustable; panel trasero de fieltro grande que distribuye uniformemente el soporte del hombro.
- Las hebillas proporcionan un ajuste firme y positivo.
- Se puede llevar discretamente debajo de la mayoría de la ropa.

INDICACIONES:

- Mala Postura: ayuda a corregir la posición jorobada.
- Fracturas de clavícula, separaciones acromioclaviculares de grado II y III, osteólisis de clavícula, dolor articular degenerativo AC, enfermedad cervical mecánica, disfunción postural, dislocaciones esternoclaviculares.



Talla UNIVERSAL

- El diseño con velcro de las correas permite ajustar la talla a conveniencia.

• Faja Corset Toracolumbar Postoperatorio OSSUR TLSO™ Miami 456

REF-MTL50-2352

La Faja – Corset Miami TLSO™ es una órtesis espinal diseñada para la inmovilización Postquirúrgica de toda la región TORACOLUMBAR en pacientes que han sido operados de la columna vertebral. Su función es aliviar el dolor, proteger ligamentos y músculos lesionados así como la inmovilización postquirúrgica

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Totalmente ensamblado para que se ajuste con facilidad.
- Sistema Doble de Poleas para ajustar la compresión y fuerza de la faja.
- Rápida y fácil de colocar, sin necesidad de herramientas.
- Panel Ergonómico para soporte Posterior de Memory Foam, máxima protección postoperatoria.

Indicaciones y Uso:

Condiciones que requieran de la inmovilización de la región lumbar.

- Inmovilización Postquirúrgica.
- Hernias de Disco.
- Soporte Espinal Toracolumbar hasta T7.
- Fracturas vertebrales degenerativas.
- Estenosis Vertebral.
- Espondilolistesis.
- Espondilolisis.



Contraindicaciones:

- Fracturas Espinales Desplazadas e inestables.

Talla UNIVERSAL:

- Circunferencia Cintura de 66 - 177 cm.
- Se adapta a Altura de pacientes entre 155 – 193 cm.



• Faja Espinal Postoperatoria para Cirugía de Columna OSSUR Miami LSO™

REF-MLSO-255-1

La Faja Miami LSO™ es una órtesis espinal diseñada para la inmovilización Postquirúrgica de pacientes que han sido operados de columna vertebral. Su función es aliviar el dolor, proteger ligamentos y músculos lesionados así como la inmovilización postquirúrgica.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Material Delgado, Liviano y Transpirable.
- Sistema Doble de Poleas para ajustar la compresión y fuerza de la faja.
- Rápida y fácil de colocar, sin necesidad de herramientas.
- Panel Ergonómico para soporte Posterior de Memory Foam, máxima protección postoperatoria.
- Inmovilización anatómica de bajo perfil.

Indicaciones y Uso:

Condiciones que requieran de la inmovilización de la región lumbar.

- Hernias de Disco.
- Fracturas vertebrales no desplazadas estables (L1-L5).
- Estenosis Vertebral.
- Espondilolistesis.
- Espondilolisis.

Contraindicaciones:

- Fracturas Espinales Desplazadas e inestables.

Talla UNIVERSAL

- Circunferencia Cintura de 66 - 127 cm.
- El borde se pliega para permitir un ajuste universal.



• Faja soporte Lumbosacro Postoperatoria Cirugía de Columna M-LSO

REF-M-LSO: MFA

Descripción:

Faja LSO es una órtesis espinal diseñada para la inmovilización Postquirúrgica de pacientes que han sido operados de la columna vertebral. Su función es aliviar el dolor, proteger ligamentos y músculos lesionados, así como la inmovilización postquirúrgica.

Características y Beneficios:

- Material Delgado, Liviano y Transpirable.
- Sistema Doble de Poleas para ajustar la compresión y fuerza de la faja.
- Rápida y fácil de colocar, sin necesidad de herramientas.
- Panel Ergonómico para soporte Posterior, máxima protección postoperatoria.
- Inmovilización anatómica de bajo perfil.

Condiciones que requieran de la inmovilización de la región lumbar.

- Hernias de Disco.
- Fracturas vertebrales no desplazadas estables (L1-L5).
- Estenosis Vertebral.
- Espondilolistesis.
- Espondilolisis.

Tallas: Medición a nivel ombligo

- CHICA – 84 a 92 cm **MFA5821**
- MEDIANA – 92 a 100 cm **MFA5822**
- GRANDE – 100 a 109 cm **MFA5823**
- EXTRA GRANDE – 109 a 120 cm **MFA5824**
- EXTRA EXTRA GRANDE – 120 a 130 cm **MFA5825**



• Collarín Miami Ajustable Talla Universal

Nuestro Collarín Cervical MIAMI J marca OSSUR ofrece el rango más amplio de ajuste de altura en el mercado, su Diseño UNIVERSAL permite inmovilizar el cuello de manera rápida y eficiente.

REF-MJS-101

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

1. Fácil ajuste de altura con un bloqueo a prueba de manipulaciones, mecanismo - Izquierda para bloquear.
2. Antimicrobiano y biocompatible El acolchado Sorbatex™ reduce el recuento bacteriano en más del 99%.
3. 7 tamaños de ajuste preciso con oportunidad de afinar.
4. De una pieza, cuello anatómicamente inspirado con Flex Edge® diseñado para reducir presión occipital.
5. Fácil de colocar, se puede poner y quitar con Ajuste reproducible patentado.

Indicaciones y Uso:

- Desordenes Degenerativos.
- Inmovilización después de trauma/cirugía.
- Estenosis Espinal.
- Espondilolistesis.
- Esclerosis Múltiple.

Talla:

- Talla UNIVERSAL.



- **Almohada de apoyo cervical para dolor de cuello, almohada ortopédica con triple soporte, firme, color blanco, tamaño universal 61 cm x 40 cm**

CARACTERÍSTICAS:

REF-FIB-200

ALIVIO DEL DOLOR Y CORRECCIÓN CUELLO:

Almohada diseñada para ayudar a corregir la postura vertebral del cuello y disminuir el dolor así como dolores de cabeza. El centro cóncavo sostiene la cabeza mientras el soporte cervical corrige la curvatura del cuello. Ayuda a restaurar la curvatura adecuada y natural de la columna vertebral.

MÁXIMA FIRMEZA: La almohada debe ser firme para proporcionar beneficios terapéuticos. Esta almohada **NO** es una almohada suave y cómoda, sino que está diseñada para restaurar la curvatura del cuello para así evitar una cirugía, puede que tengas que adaptarte a la almohada durante varias semanas.

NECESITARÁ ADAPTARSE: Puede que necesites adaptarte a la almohada durante **VARIAS SEMANAS**. El uso excesivo inmediato puede aumentar el dolor de cuello. La mayoría de los usuarios que lentamente facilitan su camino hacia la corrección ortopédica logran los mejores resultados. Alterne entre la Almohada Cervical y la actual almohada mientras tu cuerpo se ajusta. El centro con forma no es para dormir de lado.



• **Férula para Muñeca con Correa de 8", (Especificar DER/IZQ)**

REF-3000

Proporciona un apoyo firme y cómodo, con contornos anatómicos que sostienen a la muñeca en una posición funcional para promover la curación.

Características:

Laminado de espuma de memoria para máxima comodidad del paciente.

Barras de aluminio maleables para un ajuste personalizado.

Ojales fácil de localizar con contraste de color.

Correa contorneada y ajustable para el pulgar.

Panel de punto de algodón integrado para facilitar la aplicación.



Tabla de tallas para Muñequera Vission

TALLA DE Muñequera	Medida: Circunferencia de la Muñeca en Centímetros (cm)
XS	12.70 – 14.59
S	14.6 – 15.88
M	15.89 – 17.15
L	17.16 – 19.69
XL	19.70 en adelante



• Muñequera para Túnel del Carpo Ossur EXOFORM®

REF-5170

La muñequera Exoform® para Síndrome de Túnel carpiano de OSSUR está diseñada para proporcionar el máximo apoyo para el síndrome del túnel carpiano, tendinitis y esguinces suaves a moderados aliviando el dolor del paciente.

• **Máximo Alivio del Dolor:** 40% más delgado que otras marcas y con diseño ajustable, este ligero soporte de marco abierto proporciona estabilidad de los nervios estiloide Radial y Ulnar, creando una inmovilización eficiente que alivia el dolor o entumecimiento de la mano.

• **Camino hacia la Recuperación:** el ajuste anatómico así como el soporte palmar corrigen poco a poco la posición de tu mano, permitiendo un tratamiento prolongado que alivia las molestias para una curación postoperatoria más rápida y efectiva o evitando que siga el daño y así teniendo la posibilidad de evitar una cirugía.

• **Uso en reposo o trabajo:** diseño totalmente funcional con amplio espacio en la base del pulgar y área donde la mano se pliega, haciéndola cómoda para dormir o trabajar en la computadora con ella.


• **Garantiza una comodidad óptima:** el exterior está hecho de plástico rígido, mientras que el interior está moldeado en 3D y con un recubrimiento de "tacto suave" perfectamente acolchado, asegurando la máxima comodidad. Es fácil de poner y quitar.



Características

- 1 Soporte Palmar
- 2 Pliegue Ergonómico
- 3 Diseño ligero de soporte total
- 4 Correas de fácil ajuste

Soporte palmar ajustable de acuerdo a cada paciente

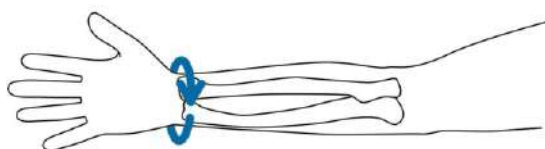

Mida la circunferencia de su muñeca y revise su medida en la talla:

Tabla de tallas para Muñequera EXOFORM®

TALLA DE Muñequera	Medida: Circunferencia de la Muñeca en Centímetros (cm)
S	14 – 16.5
M	16.5 – 19
L	19 – 24



Ofrece apoyo para aliviar el dolor al mismo tiempo que permite la flexión completa de dedos y el pulgar.

• **Férula Inmovilizador para Pulgar Universal**

REF-300990

Nuestra férula para pulgar universal Vission™ está diseñada para ajustarse cómodamente a la anatomía de la mano derecha o izquierda.

La abrazadera estabiliza las articulaciones Carpo Meta Carpiana y la Meta Carpo Falángica del pulgar para promover la cicatrización.

Características:

Laminado de espuma de memoria patentado.

Los anillos en D integrados en tela eliminan la torsión.

La forma de fácil configuración con la muñeca logra el posicionamiento deseado.

Ajuste anatómico para la estabilización.

Anillos en D fácil de localizar.



Permite mover los demás dedos

Ultra Ligera y completamente Acolchonada

Barra flexible de longitud completa

Hebillas planas para poner y quitar fácilmente

Proporciona apoyo a la muñeca por su longitud más larga



- **Articulada Posicionador de Muñeca y Mano para Hemiplejias o Cuadriplejias Específicas. Variedad: Derecha o Izquierda. Tallas Chica, Mediana y Grande**

REF-OL-WR122

Indicaciones:

Uso postquirúrgico.

Uso después de inmovilizaciones prolongadas de muñeca.

Contractura del tejido blando.

Características:

Permite rangos de movimiento entre 0° y 35° de flexión y extensión.

Facilita la curación de lesiones de tejido suave y fracturas.

Férula prefabricada con forma anatómica.



• Inmovilizador Universal de Hombro con Cabestrillo

REF-LS4106/L

Nuestro Inmovilizador de Hombro con Cabestrillo Vission™ brinda el máximo apoyo al brazo / hombro afectado para promover la cicatrización.

La franja acolchada extraíble asegura el brazo afectado contra el cuerpo.

Características:

- Construcción de laminado de espuma protectora.
- Correas dobles para un soporte equilibrado.
- Apoya cómodamente el brazo / hombro con almohadillas de espuma.
- Talla UNIVERSAL: Se adapta a cualquier tamaño.



• Cabestrillo con cojín abductor y pelota de ejercicio para cirugía de hombro

REF-LS4107U

Nuestro cabestrillo con cojín de abducción transfiere el peso del antebrazo a la espalda del paciente y al hombro no afectado mientras que realiza la abducción del brazo lejos del cuerpo en aproximadamente 10-15 grados para la rehabilitación del hombro.

- Ajusta el brazo a la posición deseada.
- Almohada de abducción con contornos.
- Pelota permite ejercitar el brazo y mejorar circulación.
- Ajustable, le queda al brazo derecho e izquierdo.

Variedad de talla

Disponibles en:

- Chico.
- Mediano.
- Grande.
- Extra grande.



• Codera ROM Postoperatoria Férula Dinámica Articulada Para Codo. Variedad: Derecha o Izquierda. Talla Universal

REF-OL-EL093

Indicaciones:

- Inmovilización Postoperatoria o control ROM (Rango de Movimiento) para el codo.
- Tratamiento para dislocación o luxación del codo.
- Fracturas estables o reducidas del húmero distal, radio proximal o cúbito.

Características:

- Permite inmovilizar el codo cada 15°.
- Cabestrillo incluido para sostener el brazo.
- Simplemente presione y gire la bisagra con bloqueo.
- Limitación de Extensión de 0° a 60°.
- Limitación de Flexión de 0° a 120°.
- Flexión de 0° a 60°.
- Ajustable cada 15°.




TALLA: Universal (Derecha e izquierda)

• Férula de Codo de Tenista con Aire, tipo Air Cast

REF-LS4202

Nuestro Soporte para Codo de Tenista ofrece presión ajustable sobre el tejido afectado para ayudar a aliviar el dolor / malestar asociado con Epicondilitis.

- Cápsula de Aire para una máxima comodidad del paciente.
- Compresión ajustable en los músculos extensores y flexores.
- Dos almohadillas de espuma reposicionables / modulares.

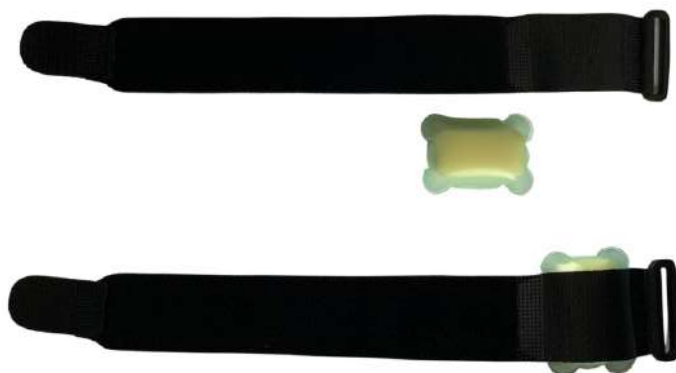

• Pad Compresa Fría de Gel con Presión de Aire para Hombro

REF-LS4115

Indicaciones:

- Poner a enfriar el Gel y aplicar, después usar la bomba de aire para hacer que se infle el Pad y se aplique el frío de forma más intensa.
- Está diseñado para combinar los beneficios de la compresión neumática y la terapia de frío.
- Dolor de hombro, atención posquirúrgica, hinchazón de hombro, artritis de hombro, derrames de hombro, esguince de hombro, distensión de hombro, rotura de cartílago, tendinitis, osteoartritis.

Características:

- 1. Envoltura de hombro anatómica diseñada para combinar los beneficios de la compresión neumática con la terapia de frío; bulbo de bomba destacado que se desprende una vez que se logra la compresión deseada.
- 2. Indicado para aplicación posoperatoria y como parte de un programa de fisioterapia o entrenamiento atlético; ayuda a disminuir la hinchazón / edema, disminuye el dolor y reduce los espasmos musculares.
- 3. Fabricado con laminado de espuma de felpa con correas de cierre de contacto, paquete de gel extraíble con forro de tricot y gel no tóxico; correas de extensión universales adicionales disponibles.



*Se adjunta video del producto
Video funcionamiento real:
<https://bit.ly/4g3GLjR>



• **Rodillera Estabilizadora de Rótula**

REF-435720

Nuestra Rodillera Estabilizadora de Rótula Vission™ utiliza correas dinámicas y un apoyo de espuma en forma de media luna para "tirar" y estabilizar la rótula subluxada en una posición anatómica que alivia el dolor.

Apoyo en forma de media luna rodea cómodamente la rótula.

Correas de tracción dinámica reacomodan y estabilizan la rótula.

UNIVERSAL para ambos lados: Se puede colocar del lado Medial o Lateral.

Área poplíteo libre de presión.

Forro suave y cómodo.



• **Rodillera Mecánica Articulada Deportiva con Soportes Laterales de Aluminio Ossur FOR MFIT**

REF- 5032

Nuestro soporte de rodilla articulado FOR MFIT combina correas envolventes, bisagras mediales/laterales y soporte compresivo para el manejo de la inestabilidad leve de la rodilla.

Neopreno perforado, transpirable, apto para la piel con bisagras policéntricas que permite utilizar la rodillera por debajo del pantalón.

Las correas sirven para fijar las bisagras en posición y minimizar el movimiento.

Tejido blando en la zona poplíteo evita el "abultamiento" atrás de la rodilla, máxima comodidad para el usuario.

Diseño pre-flexionado para un ajuste anatómico, reduce también el desplazamiento.

Estabiliza y alivia la presión sobre la rótula mediante su apoyo de silicona circular que rodea el área.



Tabla de tallas para Rodillera Mecánica Deportiva FORMFIT

TALLA DE RODILLERA	Medida: Circunferencia del Muslo 15 cm arriba de la Rodilla Centrimetros (cm)
S	39.4-47 cm
M	48-53 cm
L	54-60 cm
XL	61-68 cm

• Rodillera Postoperatoria Talla UNIVERSAL con arcos de movimiento graduados ROM

REF-OL-KN101

Arcos de movimiento graduables ROM.
Estabiliza la rodilla para la rehabilitación postoperatoria.

Tamaño universal.
Se extiende desde 45 cm a 60 cm diseño telescópico para fácil ajuste de longitud.

Diseño transpirable y de liberación rápida.

Máxima comodidad para el usuario.

Control de flexión y extensión con botón.

Bloqueo de caída para rápida inmovilización.



Inmovilizador de Rodilla Universal Tripanel

REF- LS6112/20

Nuestro Inmovilizador de Rodilla Universal Vision™ estabiliza la rodilla después de una operación o lesión.

Se adapta a la circunferencia del muslo de 30 cm a 82 cm.

Cintas ajustables y sumamente ligera, máxima comodidad.

Los anillos en D integrados en tela eliminan la torsión.

Forma posterior fija y ergonómica.

El material laminado de espuma blanda permite hacer recortes para cualquier ajuste.



• Pad Compresa Fría de Gel con Presión de Aire para Rodilla

REF-LS6121U

Indicaciones:

- Poner a enfriar el Gel y aplicar, después usar la bomba de aire para hacer que se infle el Pad y se aplique el frío de forma más intensa.
- Está diseñado para combinar los beneficios de la compresión neumática y la terapia de frío.
- Dolor de rodilla, atención posquirúrgica, hinchazón de rodilla, artritis de rodilla, derrames de rodilla, esguince de rodilla, distensión de rodilla, rotura de ligamento, rotura de cartílago, tendinitis, osteoartritis.

Características:

- 1) Envoltura de rodilla anatómica diseñada para combinar los beneficios de la compresión neumática con la terapia de frío; bulbo de bomba destacado que se desprende una vez que se logra la compresión deseada.
- 2) Indicado para aplicación posoperatoria y como parte de un programa de fisioterapia o entrenamiento atlético; ayuda a disminuir la hinchazón / edema, disminuye el dolor y reduce los espasmos musculares.
- 3) Fabricado con laminado de espuma de felpa con correas de cierre de contacto, paquete de gel extraíble con forro de tricot y gel no tóxico; correas de extensión universales adicionales disponibles.



*Se adjunta video del producto
Video funcionamiento real:
<https://bit.ly/4g3GLJR>



• **Soporte para Cadera Articulado Mecánico Graduable ROM.
Tamaño Derecho e Izquierdo**

REF-OL-HP007

Nuestro Soporte Ortesis Articulada para Cadera ofrece un control suave para la Flexión/Extensión y la Abducción/Aducción de la articulación para la rehabilitación de la Cadera.

Características:

- La Bisagra ROM se puede bloquear en los siguiente ángulos: -30° , -15° , 0° , 15° , 30° .
- Control ROM en incrementos de 15° :
-Flexión -30° a 90° .
-Extensión -30° a 30° .
- La Abducción/Aducción pueden ser ajustados de forma continua entre -60° a 60° .
- Largo Universal: Diseño Telescópico para ajustar el largo de la ortesis de 44 cm a 52 cm.
- Máxima Comodidad: Tela transpirable que no absorbe calor.

TALLA:

Hay que elegir entre Pierna Izquierda y Derecha, el Largo es Universal.

Indicaciones:

Rehabilitación Postoperatoria de:

- Resección de Cabeza Femoral.
- Reemplazo Total de la Articulación de Cadera.
- Cirugía de Revisión de Cadera.
- Artroscopia de Cadera.
- Dislocación de la Cadera.
- Fractura de Cadera.



• Férula Bota Walker Corta CON AIRE, marca ALLARD

REF- LS78005

Walker corto CON AIRE

Sistema de aire para amortiguamiento, proporciona la máxima comodidad.

- Suela curva para una marcha más natural.
- El ancho extra del talón proporciona mayor estabilidad.
- Plantilla acolchonada para una mejor absorción de golpes.
- Transpirable, absorbe la humedad.

Variedad de talla:

- Chica.
- Mediana.
- Grande.
- Extra grande.

DA CLICK PARA
VER VIDEO



*Se adjunta video del producto
Video funcionamiento real:
<https://bit.ly/3OKAspq>



• Férula Bota Walker Larga CON AIRE, marca ALLARD

REF-LS78003

Walker larga CON AIRE

Sistema de aire para amortiguamiento, proporciona la máxima comodidad.

- Suela curva para una marcha más natural.
- El ancho extra del talón proporciona mayor estabilidad.
- Plantilla acolchonada para una mejor absorción de golpes.
- Transpirable, absorbe la humedad.

Variedad de talla:

- Chica.
- Mediana.
- Grande.
- Extra grande.

DA CLICK PARA
VER VIDEO



*Se adjunta video del producto
Video funcionamiento real:
<https://bit.ly/3OKAspq>



• Tobillera con Aire/Gel tipo Air cast

Indicaciones:

- Esguince de tobillo leve o moderado.
- Inestabilidad crónica del tobillo.
- Uso profiláctico y terapéutico en actividades deportivas.

Características:

- UNIVERSAL Se adapta al pie DERECHO o IZQUIERDO.
- Combinación de Bolsas de Aire y Gel para terapia en frío o incluso presión distribuida.
- Cubierta de plástico de contorno anatómico.
- Simple de aplicar y ajustar gracias a sus dos cintas con velcro.
- Correa de talón ajustable.



REF-OL-AN060

• Férula Nocturna para Fascitis Plantar/Espolón

Nuestra Férula Nocturna para Fascitis Plantar VISSION™ ayuda a estirar la fascia plantar con correas dorsiflexión bilaterales ajustables.

El uso nocturno reduce el dolor diurno asociado con Fascitis Plantar, tendinitis de Aquiles y otras condiciones de pie y tobillo.

Características:

- Estiramiento suave para el tendón de Aquiles y la Fascia Plantar.
- La cuña metatarsal maximiza el estiramiento de dorsiflexión.
- Tirantes de dorsiflexión ajustables y bilaterales.
- Suela antideslizante.
- Se adapta al pie derecho o izquierdo.

VISION™



REF- LS7109

• Anillo Patelar Rotuliano Patella Tendon Brace

REF-OL-KN005

La Banda Patelar con aire está indicada para el alivio sintomático de dolor en la rótula, la rodilla de saltador, la enfermedad de Osgood-Schlatter, la rodilla de corredor (condromalacia rotuliana) y la tendinitis infrapatelar.

1. Mayor compresión. Celda de aire ejerce un 50% más de compresión debajo de la rodilla que con una banda convencional.
2. Cómoda. La banda acolchada y forrada de espuma difunde la presión sobre el tendón de la rótula.
3. Talla Universal. Se adapta a la pierna izquierda o derecha. Se adapta a la circunferencia de la rodilla: 10 "-17" (25-43 cm).

Indicaciones de uso:

- Reducir la tendinitis rotuliana.
- Disminuir los medicamentos antiinflamatorios.
- Disminuir los síntomas del dolor.
- Mejorar el rango de movimiento.
- Mejorar la actividad.



• Pad Compresa Fría de Gel con Presión de Aire para Tobillo

REF-LS7124U

Indicaciones:

- Poner a enfriar el Gel y aplicar, después usar la bomba de aire para hacer que se infle el Pad y se aplique el frío de forma más intensa.
- Está diseñado para combinar los beneficios de la compresión neumática y la terapia de frío.
- Dolor de tobillo, atención posquirúrgica, hinchazón de tobillo, artritis de tobillo, derrames de tobillo, esguince de tobillo, distensión de tobillo, rotura de ligamento, tendinitis, osteoartritis.

Características:

- 1) Envoltura de tobillo anatómica diseñada para combinar los beneficios de la compresión neumática con la terapia de frío; bulbo de bomba destacado que se desprende una vez que se logra la compresión deseada.
- 2) Indicado para aplicación postoperatoria y como parte de un programa de fisioterapia o entrenamiento atlético; ayuda a disminuir la hinchazón / edema, disminuye el dolor y reduce los espasmos musculares.
- 3) Fabricado con laminado de espuma de felpa con correas de cierre de contacto, paquete de gel extraíble con forro de tricot y gel no tóxico; correas de extensión universales adicionales disponibles.



*Se adjunta video del producto
Video funcionamiento real:
<https://bit.ly/3BgdBiv>



• Cubierta para Yeso y Vendajes contra Agua para Regadera, Tamaño: BRAZO ADULTO, BRAZO CORTO, MANO

REF-KRP/FL-230

La cubierta de yeso impermeable y reutilizable SEALCUFF ofrece una protección hermética contra el agua para yesos o vendajes del brazo o mano de todo tamaño.

Úselo en la regadera, baño, alberca, playa o afuera bajo la lluvia, y siempre sepa que su yeso está completamente protegido.

CARACTERÍSTICAS:

- Un cómodo protector de yeso resistente al agua, compuesto de termoplástico elástico con alto sellado.
- Diseño reutilizable de látex.
- Excelente protección contra la humedad, 100% a prueba de agua.
- Seguro y conveniente de usar, no irrita la piel.
- El anillo de sellado engrosado no se rasgará ni rasgará su piel.
- Múltiples tamaños disponibles para adultos y niños.
- Recomendado solo para uso en un solo paciente.
- No es adecuado para usar con heridas abiertas o desnudas o al nadar.

TAMAÑOS DISPONIBLES

- Brazo Completo arriba del Codo.
- Brazo Corto debajo del Codo.
- Mano.

También disponibles todos los modelos en tamaño pediátrico.



*Se adjunta video del producto
Video funcionamiento real:
<https://bit.ly/3Zu4nY0>



• Cubierta para Yeso y Vendajes contra Agua para Regadera, Tamaño: PIE, PIERNA CORTA, PIERNA LARGA

REF-KRP/FL-230

La cubierta de yeso impermeable y reutilizable SEALCUFF ofrecen una protección hermética contra el agua para yesos o vendajes de pierna o pie de todo tamaño.

Úselo en la regadera, baño, alberca, playa o afuera bajo la lluvia, y siempre sepa que su yeso está completamente protegido.

CARACTERÍSTICAS:

- Un cómodo protector de yeso resistente al agua, compuesto de termoplástico elástico con alto sellado.
- Diseño reutilizable de látex.
- Excelente protección contra la humedad, 100% a prueba de agua.
- Seguro y conveniente de usar, no irrita la piel.
- El anillo de sellado engrosado no se rasgará ni rasgará su piel.
- Múltiples tamaños disponibles para adultos y niños.
- Recomendado solo para uso en un solo paciente.
- No es adecuado para usar con heridas abiertas o desnudas o al nadar.

TAMAÑOS DISPONIBLES:

- Pierna Completa arriba de Rodilla.
- Pierna Corta debajo de Rodilla.
- Pie.

También disponibles todos los modelos en tamaño pediátrico.



*Se adjunta video del producto
Video funcionamiento real:
<https://youtu.be/-4vDP9psSPs?si=90K1al27JRuKuqvV>



• Sistema de Electroterapia EMS tonificación muscular y alivio de dolor K00045 PERFECT EMS

REF- K-PEMS



Descripción:

Estimulación Electro Mecánica (EMS) directa del músculo para que se contraiga y mejore su condición, logrando: Tonificación, Rehabilitación y Modelado muscular.

La unidad Perfect EMS proporciona tonificación, modelado y rehabilitación muscular a través de EMS, con programas adicionales de alivio del dolor que utilizan TENS para aliviar el dolor causado por lesiones y tensión muscular. Trabaja en abdominales, brazos, piernas o cualquier músculo de tu cuerpo.

Trata la Pérdida muscular: recupera masa muscular, facilitación neuromuscular, reeducación muscular, entrenamiento muscular, prevención/ralentización de la atrofia/hipertrofia y reducción de la espasticidad.

Alivio del dolor Deportivo: Ayuda al calentamiento, fuerza, velocidad, potencia, resistencia, resistencia y recuperación muscular.

Características:

- 2 canales independientes con 4 electrodos para tratar 2 zonas al mismo tiempo.
- 6 programas EMS preestablecidos que incluyen calentamiento, resistencia, potencia y volumen.
- 2 programas TENS manuales y 2 programas EMS manuales que se pueden definir para experimentar y guardar configuraciones preferidas
- Estimulación cómoda con 90 pequeños pasos de intensidad.
- Funciones de memoria que guardan el número de usos y el tiempo de uso.
- Retención del programa (se inicia automáticamente en el último programa utilizado).
- Aplicaciones de belleza: reducción de la aparición de arrugas y celulitis.

Dimensiones – 120 x 60 x 20 mm

Peso – 120 gramos

Amplitud – 90 mA (max)

Frecuencia TENS: 1 - 120 / EMS: 1 - 80 (Hz)

Ancho de Pulso TENS: 50 - 250 / EMS: 50 - 350 μ s

Forma de Onda – Asimétrica Bi-Fásica

Alimentación – x2 AA

Código Producto – K-PEMS



Contenidos



x1 Dispositivo



x4 Electrodo



x2 Cables

• Electro terapia Deportiva para Tonificación y Masaje Muscular EMS, TENS K00155 SPORTS TENS 2

Descripción:

Combina en un solo dispositivo la Electro terapia para Alivio del Dolor TENS (Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea), la Estimulación Electro Mecánica (EMS) y el masaje muscular.

Sports TENS es un estimulador muscular y una unidad de alivio del dolor con programas de masaje adicionales para proporcionar relajación y desestresarse.

Trata la Pérdida muscular: facilitación neuromuscular, reeducación muscular, entrenamiento muscular, prevención/ralentización de la atrofia/hipertrofia y reducción de la espasticidad.

Entrenamiento deportivo: calentamiento, fuerza, velocidad, potencia, resistencia, resistencia y recuperación muscular.

Características:

- 2 canales independientes con 4 electrodos para tratar 2 zonas al mismo tiempo.
- 10 TENS preestablecidos, 27 EMS preestablecidos, 10 programas de masaje preestablecidos.
- 2 programas TENS manuales y 6 programas EMS manuales que se pueden definir para experimentar y guardar configuraciones preferidas.
- 99 pequeños pasos de intensidad.
- Los programas EMS tienen 3 fases (calentamiento, trabajo y enfriamiento).
- Relajación muscular: aflojamiento de la tensión muscular, mejorando los síntomas de fatiga muscular así como acelerando la regeneración muscular.
- Historial de uso diario por programa y por tiempo (hasta 90 días de uso).

Dimensiones – 114 x 56 x 23 mm

Peso – 90 gramos

Amplitud – 99 mA (max)

Frecuencia 2 - 150 Hz / EMS: 3 Hz - 120
/ Massage: 1 - 250 Hz

Ancho de Pulso TENS: 50 - 300

/ EMS: 20 - 350 / Massage: 25 - 300 μ s

Forma de Onda – Asimétrica Bi-Fásica

Alimentación – Li-ion, 900mAh, 3.7 V

TensCare™

REF- K-ST2





• Sistema digital de Electroterapia TENS Alivio del Dolor K00062 PERFECT TENS

REF- K-PEMS

Descripción:

Electro terapia para Alivio del Dolor crónico derivado de problemas musculares mediante TENS (Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea).

Esta unidad está específicamente diseñada para proporcionar alivio del dolor seguro y eficaz en la comodidad de tu propia casa. Puede ayudar a administrar el dolor de una amplia gama de condiciones.


Dolor crónico: dolor de espalda, artritis, dolor reumático, lumbago, dolor de cadera, artrosis dolor en la rodilla y ciática central dolor.

Dolor musculoesquelético: fibromialgia, caídas, esguinces, golpes directos en los músculos y accidentes automovilísticos.


Dolor agudo: Dental y dolor facial, dolor de cuello, dolor postoperatorio, migraña y neuralgias.

Características:

- 2 canales independientes con 4 Almohadillas de electrodos para tratar 2 zonas al mismo tiempo.
- 1 programa manual que se puede definir para experimentar y guardar la configuración preferida.
- 8 programas TENS preestablecidos que incluyen: Modos de ráfaga, constante y modulación también como estimulación HAN.
- Cómoda estimulación con 60 pequeños pasos de intensidad.
- Funciones de memoria guardando el número de usos y tiempo de uso.
- Retención del programa (inicia automáticamente en el último programa que se utilizó).

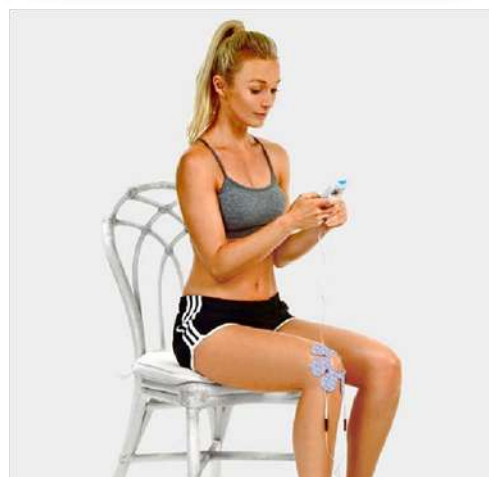

Contenidos

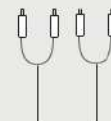x1
Dispositivox4
Electrodos

x2 Cables

Dimensiones – 120 x 60 x 20 mm

Peso – 120 gramos

Amplitud – 60 mA (max)

Frecuencia 2 – 150 (Hz)

Ancho de Pulso 50 – 250 μ s

Forma de Onda – Simétrica Bi-Polar rectangular

Alimentación – x2 AA



www.artromed-medical.com
ventas@artromed-medical.com
(55) 5293-0369

Av. de los Arcos 22, Naucalpan Centro, 53000
Naucalpan de Juárez, Méx.